

drive™

www.drivemedical.com

Rev.5.02.25.14

ready set go
shower chair

silla para ducha portátil

chaise de douche
ready set go

item # RTL12105KDR



EU Authorized Representative
Drive International, LLC
Globe Lane - Stockport
DUKINFIELD SK16 4RE, GB

www.drivemedical.com

drive™

installation instructions

WEIGHT CAPACITY 300 LBS (136 KG)

1. Turn shower chair upside down on flat surface.
2. Insert legs into shower chair. Be sure snap buttons pop out through legs completely (Figure 1).
3. Turn over shower chair with legs attached so all four legs are on the floor.
4. Slide elbow tubing into back receptacle under the seat (Figure 2). Be sure snap buttons pop out completely. Repeat for second elbow.
5. Attach back support into elbows (Figure 3). Be sure snap buttons pop out completely.

adjusting leg extensions

1. Select one (1) of the eight (5) adjustment holes located on the lower leg frame.
2. Depress the snap button and slide the adjustable leg up or down to the desired height.
3. Ensure that the snap buttons fully protrude through the same respective adjustment hole of each leg extension.
4. Repeat STEPS 2-3 for the other legs.
5. Make sure all four (4) legs are adjusted to the same height so that the shower chair sits level.

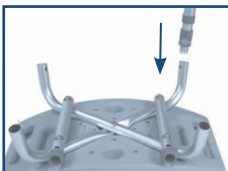


figure 1



figure 2



figure 3

lifetime limited warranty

Your Drive branded product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the product for the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.

© 2014 Medical Depot, Inc. All rights reserved.

Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.

Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

instrucciones de instalación

CAPACIDAD 300 LBS DE PESO (136 KG)

1. Ponga el banco para baño patas para arriba sobre una superficie plana.
2. Inserte las patas en el banco para baño. Asegúrese que los botones de presión salgan completamente a través de las patas (Figura 1).
3. Dé vuelta el banco para baño con las patas colocadas de tal forma que las cuatro patas apoyen sobre el piso.
4. Deslizar el tubo de codo en el receptaculo espaldar debajo del asiento (Figura 1). Asegúrese que los botones de presión protruyan completamente. Repita para el segundo codo.
5. Conecte el soporte espaldar en los codos (Figura 3). Asegúrese que los botones de presión protruyan completamente.

ajustando las extensiones de las patas

1. Seleccione uno (1) de los cinco (5) orificios de ajuste localizados en el marco de la pata inferior.
2. Apriete el botón de presión y deslice la pata ajustable hacia arriba o hacia abajo hasta la altura deseada.
3. Asegúrese que los botones de presión protruyan completamente a través del respectivo orificio de ajuste de cada extensión de la pata.
4. Repita los PASOS 2-3 para las otras patas.
5. Asegúrese que las cuatro (4) patas estén ajustadas a la misma altura de tal manera que el banco para baño esté nivelado.

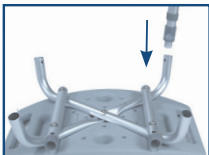


figura 1



figura 2



figura 3

garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del producto por el comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.

© 2014 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.

Drive es marca registrada de medical depot, Inc.
Port Washington NY 11050 USA Hecho en China

directives d'installation

CAPACITÉ DE POIDS DE 300 LBS (136 KG)

1. Retournez la banquette de bain à l'envers sur une surface plane.
2. Insérez les pieds de la banquette. Assurez-vous que les boutons poussoirs des pieds sont complètement sortis (Figure 1).
3. Après avoir fixé les pieds, retournez la banquette à l'endroit et assurez-vous que les quatre pieds sont tous de niveau sur le sol.
4. Glissez à nouveau dans la tubulure (Figure 2). Assurez-vous que les boutons-poussoirs sont complètement sortis.
5. Attachez l'appui pour le dos dans les coudes (Figure 3). Soyez sûr que les boutons rapides sortent complètement.

réglage des extensions des pieds

1. Choisissez l'un (1) des cinq (5) trous d'ajustement situés sur le cadre inférieur des pieds.
2. Appuyez sur le bouton-poussoir et glissez le pied ajustable en montant ou en descendant jusqu'à la hauteur désirée.
3. Assurez-vous que les boutons-poussoirs sont complètement sortis et à la même hauteur sur chaque extension de pied.
4. Répétez l'ÉTAPE 2-3 pour les autres pieds.
5. Assurez-vous que les quatre (4) pieds sont ajustés à la même hauteur afin que la banquette de bain soit de niveau.

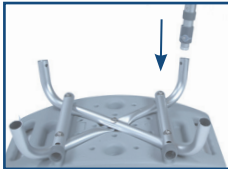


figure 1



figure 2



figure 3

garantie à vie, limitée

Ce produit Drive est garanti exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre pour la vie du produit pour l'acheteur de consommateur original.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu'aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.

© 2014 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.

Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.
Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en China